

Dental Prummel presenteert: **TCS® Unbreakable Protheses**

Onbreekbaar


Lichtgewicht

Flexibel



Dental Prummel presenteert: TCS® Unbreakable Protheses

Als er één of meer gebitselementen ontbreken, kan een patiënt uit meerdere oplossingen kiezen. Een mogelijke keuze is een uitneembare partiële prothese. Als gevolg van doorbraken in de kennis over thermoplasten staat u sinds kort een nieuwe optie ter beschikking, de TCS thermoplastische nylonprothese.

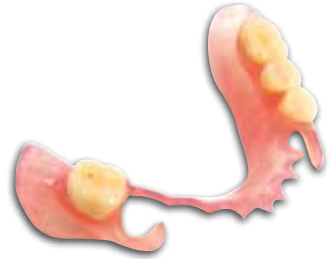

TCS Thermoplastische Nylonprothese

Thermoplasten zijn kunststoffen die door verwarming zacht worden en dan vervormbaar zijn. Na afkoeling worden ze in de nieuwe vorm weer vast van structuur. TCS Unbreakable is een onbreekbaar en flexibel nylon thermoplast. Partiële protheses vervaardigd van TCS Unbreakable zijn sterk, duurzaam, biocompatibel en vrij van monomeer.

TCS is flexibel en daardoor kan voor retentie meer gebruik worden gemaakt van ondersnijdingen in de dentitie. Bovendien is het materiaal heel licht van gewicht en kan heel dun worden geleverd, wat het draagcomfort ten goede komt. Eventuele verankeringen of spalkende delen worden in één geheel uit de kunststof geperst en maken deel uit van een onbreekbaar geheel. Ook hecht tandplak niet makkelijk aan Tcs. Het materiaal buigt zich in de juiste vorm terug en wordt – mits vochtig bewaard – niet broos of poreus.

Dental Prummel biedt u in samenwerking met kunststoffabrikant- en leverancier Vertex Dental, als één van de eerste laboratoria in Nederland de mogelijkheid de flexibele prothese aan u te leveren. De levertijd is vier werkdagen. De prijs ligt op een vrijwel vergelijkbaar niveau als een partiële prothese met verankeringen en/of versterkingen.



Flexibele Gebitsprotheses

De onbreekbare TCS prothesen kunnen worden gebruikt wanneer een uitneembare partiële prothese bij een patiënt wordt overwogen. Uw patiënt zal verheugd zijn met een esthetische oplossing gemaakt van de jongste generatie thermoplastische nylon kunststoffen, die comfortabel en duurzaam zijn.

- De voordelen op een rij
- Zeer flexibel
 - Breukvast
 - Geen gebruik metalen klammers
 - Zeer licht gewicht, wat het draagcomfort verbetert
 - Prothese kan zeer dun worden uitgevoerd
 - Zal altijd in de juiste vorm terugbuigen
 - Gemakkelijk te plaatsen en te verwijderen
 - Monomeer vrije kunststof
 - De transparante uitvoering oogt zeer natuurlijk
 - Wordt niet broos of poreus.

Flexibele prothese



TCS Unbreakable prothesen kunnen niet worden gerebaseerd en slechts zeer beperkt worden gerepareerd. De onbreekbare eigenschap van het materiaal zal dit echter ook nauwelijks noodzakelijk maken.

Patiëntinstructies

- Eerst goed afspoelen met warm water
- Poetsen met een extra zachte borstel en uitsluitend met water
- Geen tandpasta, bleekmiddelen, etc gebruiken

Wanneer de prothese niet wordt gedragen, deze bewaren in water.



Uw Prothese



Gebruiksaanwijzing Prothese



TCS Unbreakable Prothese

Uit deze reeks

Dental Laboratorium Prummel BV

Schweitzerlaan 3

Postbus 26

T 050 526 81 81

W www.dentalprummel.nl

9728 NR Groningen

9700 AA Groningen

F 050 526 05 93

E info@dentalprummel.nl